

Anigen Rapid FCoV Ab

Información General

Objetivo: Detección de anticuerpos del Coronavirus Felino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Sangre entera, plasma o suero

Materiales:

- Dispositivo Prueba rápida Anigen FCoV Ab
- Tubo con Anticoagulante
- Tubo de ensayo con diluyente
- Tubo capilar desechable

Características especiales:


- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
 - Sensibilidad: 96.0 % vs. IFA
 - Especificidad: 97.9 % vs. IFA



▪ **Como hacer diagnósticos de FIP con la prueba rápida FCoV Ab**

- Muchos gatos aparentemente sanos y gatos con otras condiciones distintas a la FIP pueden resultar positivos a la prueba de anticuerpos
- Algunos gatos con FIP efusiva parecen tener títulos bajos o pueden resultar negativos a la prueba de FCoV Ab.
- Las pruebas de FCoV Ab solo deben usarse para diagnosticar FIP en conjunción con un historial compatible, signos clínicos, así como un examen de la hemorragias, concentraciones altas de inmunoglobulinas o bien una relación A:G baja.

Procedimiento

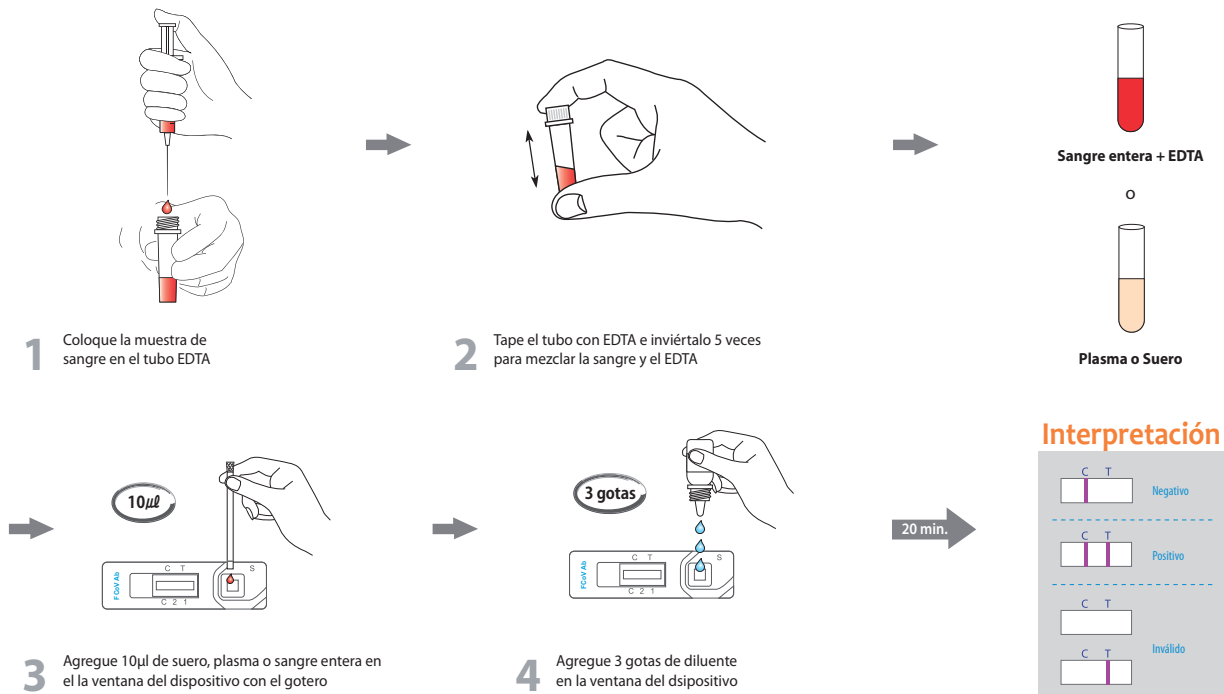

Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RB2203DD	FCoV Ab	Dispositivo	10 Pruebas/Kit